

Gebruikershandleiding

voor beddengoed

Er zijn verschillende Parafriicta® lakens en kussenslopen verkrijgbaar voor gebruik in verschillende omgevingen. Gebruik deze handleiding om het meest geschikte product te selecteren.

Parafriicta® lakens en kussenslopen zijn herbruikbare producten die bedoeld zijn om de kwetsbare huid (bijv. behandelde brandwonden, met risico op decubitus, epidermolysie-bullosa en andere kwetsbare huidaandoeningen) te beschermen tegen letsel veroorzaakt door **wrijving** en bijbehorende **schuifkrachten**, alleen of in combinatie met druk herverdelende hulpmiddelen.

Decubitus (drukletsels/doorligwonden) kan leiden tot ernstige gevolgen en zelfs levensbedreigend zijn voor de gezondheid als dit niet wordt behandeld. **Vraag altijd advies aan een gekwalificeerde zorgverlener als u denkt dat u, of een persoon die u verzorgt, decubitus heeft.**

Sommige lakens zijn bedoeld om gebruikers met beperkte mobiliteit te helpen, bijvoorbeeld omwille van neurodegeneratieve en arthritische omstandigheden, bij het wegglijden en omkeren in bed (zelfherpositionering).

Gebruiksaanwijzing

Het beste laken voor gebruik kiezen. Houd rekening met vier factoren.

1. De reden voor het gebruik van het laken (a) huidbescherming (b) hulp bij herpositionering
2. Het type bedframe, d.w.z. vlak of verstelbaar/hoog-laag
3. Het type matras, d.w.z. standaard, statische of dynamische druk herverdeling
4. De grootte van de matras (a) eenpersoons (b) dubbel/kingsize
5. Bepaal of het belangrijk is dat het artikel gemakkelijker te onderscheiden is van normaal bedlinnen (wit of blauw).

Het beste laken voor gebruik kiezen

Raadpleeg de onderstaande tabel

Productbeschrijving	Productcode	Gebruikt voor	Type bed of matras	Kleur
Eenpersoons hoeslaken	PFFSS-001/B	Huidbescherming	Alleen vlak bed, standaardmatras of statische, druk herverdelende matras	Wit of blauw
Eenpersoons vlak laken (dynamisch)	PFFSS-002	Huidbescherming	Alleen vlak bed, standaardmatras of statische, druk herverdelende matras	Wit
Eenpersoons vlak laken	PFFSS-003/B	Huidbescherming	Vlak of gekanteld bed, standaardmatras of statische, druk herverdelende matras	Wit of blauw
Eenpersoons, half passend laken (mobiliteitsondersteunend)	PFMAS-001/B	Zelfherpositionering	Vlak of gekanteld bed, standaard- of statische druk herverdelende matras	Wit of blauw
Dubbel, vlak laken (dubbel gebruik)	PFFDS-001	Zelfherpositionering of huidbescherming	Vlak of gekanteld bed, standaard- of statische druk herverdelende matras	Wit
Kussensloop	PFFPC-001/B	Huidbescherming	Rechthoekig hoofdkussen	Wit of blauw


Zorg ervoor dat het laken of de kussensloop bij de matras of het hoofdkussen past

Raadpleeg de onderstaande tabel

Productbeschrijving	Productcode	Grootte van de matras of het hoofdkussen	Afmetingen
Eenpersoons hoeslaken	PFFSS-001	190cm x 90cm	Passend. Paneel van Parafricta®-stof 74 cm x 174 cm
Eenpersoons vlak laken (dynamisch)	PFFSS-002	180-200cm x 90-100cm	160 cm x 274 cm paneel van Parafricta®-stof 74 cm x 174 cm
Eenpersoons vlak laken	PFFSS-003	180-200cm x 90-100cm	172 x 292 cm paneel van Parafricta®-stof 74 cm x 174 cm
Eenpersoons, half passend laken (mobiliteitsondersteunend)	PFFMAS-001	190cm x 90cm	Passend aan de bovenkant. Centraal paneel van Parafricta®-stof 65 cm x 132 cm
Dubbel, vlak laken (dubbel gebruik)	PFFDS-001	180-200cm x 130-140cm	250 cm x 300 cm paneel van Parafricta®-stof 100 cm x 120 cm
Kussensloop	PFFPC-001	Rechthoekig hoofdkussen	48cm x 71cm

Overige instructies

- Het beddengoed moet worden vervangen als het vuil is of naargelang een klinisch oordeel (hetzelfde als normaal beddengoed).
- Onder het laken kan een absorberend kussen worden gebruikt voor urine, wondexsudaat, zweet of speeksel, indien nodig.
- Het eenpersoons vlak laken voor dynamische matrassen moet op de matras rusten en niet strak ingestopt worden.
- De kussensloop moet zich bovenop de Parafricta® wrijvingsarme stof bevinden.
- Het geweven label van Parafricta® op het laken geeft de bovenkant en het bovenste uiteinde aan.
- Het paneel van alle lakens moet zich onder de romp van de gebruiker bevinden.
- Wanneer lakens worden gebruikt voor huidbescherming, moeten de hielen op het Parafricta®-paneel rusten.
- Wanneer lakens worden gebruikt om zelfpositionering te vergemakkelijken, moeten de hielen op het polykatoen rusten.
- Gooi het laken weg als het vuil niet verwijderd kan worden door wassen of bij beschadiging van de Parafricta®-stof of de omringende naden.

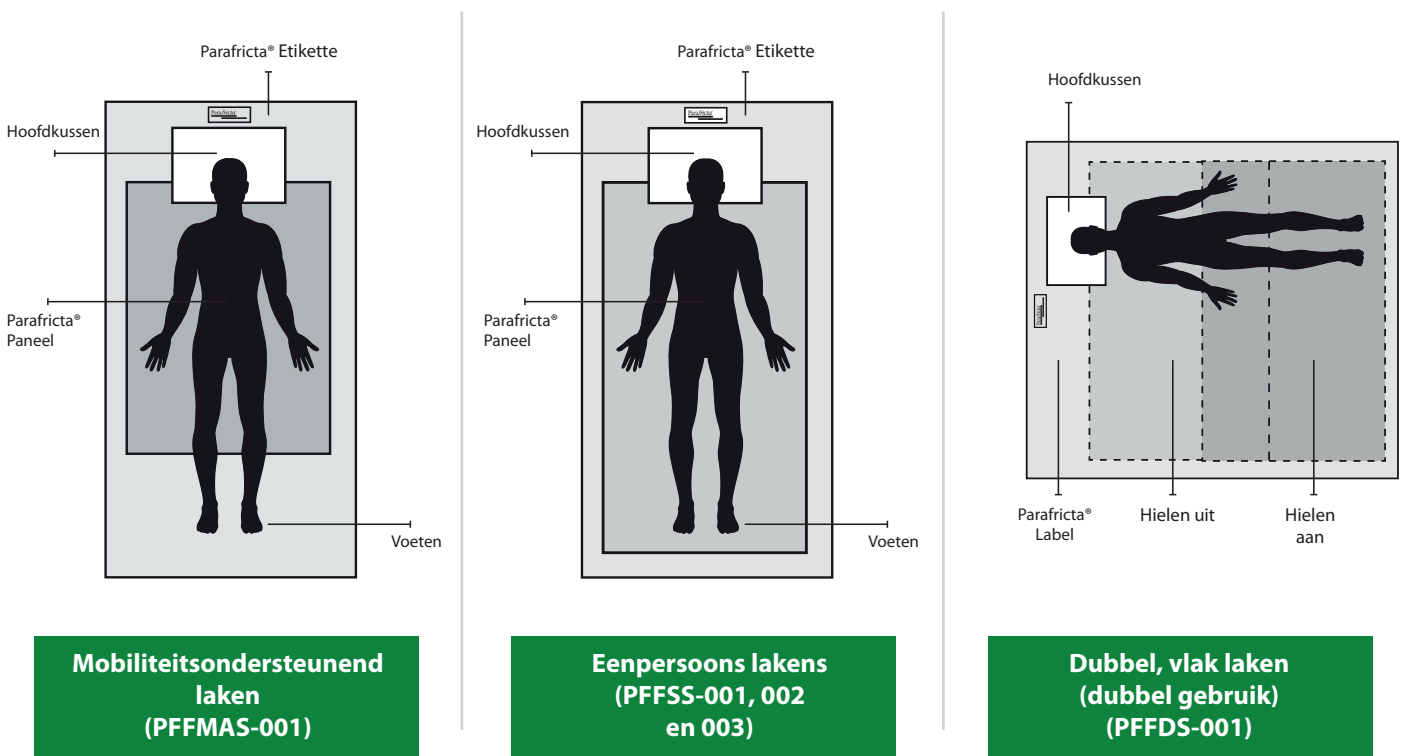

Voorzorgsmaatregelen

- Het mobiliteitsondersteunend laken biedt geen verlichting voor de hielen tegen wrijving en bijbehorende schuifkrachten.
- Indien nodig moeten ook Parafricta® enkellaarsjes worden gebruikt.















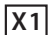

Wasinstructies

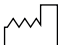- Parafricta® lakens moeten worden gewassen in een warme (60 °C) synthetische cyclus in een huishoudelijke wasmachine, of in een cyclus van 95 °C als maximale ontsmetting is vereist.
- Drogen aan waslijn (openlucht) of in de wasdroger op een lage, synthetische cyclusinstelling.
- In een professionele wasserij kunnen de lakens worden gewassen in een cyclus van 70 °C tot 10 minuten of in een cyclus van 95 °C als maximale ontsmetting is vereist.
- Strijk indien nodig op lage temperatuur.
- Gebruik geen huishoudelijk/chloorbleekmiddel.
- Niet chemisch reinigen.

Referenties

Zie www.parafricta.com 'Publicaties' en 'Onderwijsmiddelen'

Verklarende woordenlijst met symbolen die worden gebruikt op verpakkingsbijlagen

 REF	Catalogusnummer		Niet chemisch reinigen
 X1	Verpakking per stuk		Uniek artikelnummer
	Raadpleeg de elektronische gebruiksaanwijzing		Batchcode
	Website Patiëntgegevens		Productiedatum
	Maximale wastemperatuur 60 °C		Uiterste gebruiksdatum
	Alleen bleekmiddel met zuurstof/zonder chloor toegestaan		Medisch hulpmiddel
	Drogen in de wasdroger mogelijk – drogen bij een lagere temperatuur – maximale uitlaattertemperatuur 60 °C		Voldoet aan de EU-voorschriften voor medische hulpmiddelen
	Strijk bij een maximale temperatuur van 110 °C		Voldoet aan de Britse richtlijn voor medische hulpmiddelen

Geproduceerd door



APA Parafricta Ltd

30 Upper High Street, Thame, OX9 3EZ, Verenigd Koninkrijk

Tel +44 1869 226566

info@parafricta.com

www.parafricta.com

APA Parafricta® Ltd is een geregistreerde fabrikant van medische hulpmiddelen bij de Britse MHRA. Het bedrijf is ook geregistreerd in de EUDAMED-database van de EU voor fabrikanten van medische hulpmiddelen.

Vezelgehalte van beddengoed

Wrijvingsarm paneel/zijkant: 100% nylon

Omhulsel/achterkant: 60% polyester 40% katoen

Latexvrij



Geautoriseerde vertegenwoordiger in de Europese Unie

EC REP

European Healthcare & Device Solutions (Ireland) Ltd

Stratton House, Bishopstown Road, Cork T12 Y9TC, IERLAND

info@europeandevicesolutions.eu

Importeur



Hospidex nv

Grijpenlaan 23, 3300 Tienen, BELGIË

info@hospidex.eu