

# Gebruikershandleiding

## voor enkellaarsjes

Er zijn twee modellen van Parafriicta® herbruikbare enkellaarsjes.



**Instap**



**Velcro® sluiting**

Parafriicta® enkellaarsjes van stof met lage wrijving zijn herbruikbare producten die bedoeld zijn om te helpen bij de preventie of genezing van decubitus, alleen of in combinatie met wondverbanden of drukontlastingsapparatuur.

Decubitus (drukletsels/doorligwonden) kan leiden tot ernstige gevolgen en zelfs levensbedreigend zijn voor de gezondheid als dit niet wordt behandeld. **Vraag altijd advies aan een gekwalificeerde zorgverlener als u denkt dat u, of een persoon die u verzorgt, decubitus heeft.**

## Gebruiksaanwijzing

- Ontworpen voor gebruik in bed of zetel, om de huid t.h.v. de voeten te beschermen, met name op de hielen.
- Kan worden gebruikt in combinatie met geschikte drukverdelende hulpmiddelen (bijv. matras, kussen of wig).
- Selecteer een maat die comfortabel past volgens de maattabel.
- Als het voor de gebruiker moeilijk is om een instapmodel enkellaarsje aan of uit te trekken, of als bescherming over het enkelbeen vereist is, of als er risico op zwelling van de enkel bestaat, kunt u het gebruik van een Parafriicta® enkellaarsje met

## Gebruiksaanwijzing (Fortsetzung)



Velcro® sluiting overwegen.

- Als u een Velcro® sluiting gebruikt, maak dan de banden los zodat de voet in het enkellaarsje kan schuiven en bevestig stevig maar niet strak met de Velcro.
- Sokken of kousen mogen niet in de enkellaarsjes worden gedragen, behalve voor anti-embolie of met compressiekousen voorgeschreven door een arts.
- De enkellaarsjes hebben een antislipzool, zodat dragers zich veilig van het bed naar een stoel kunnen verplaatsen.
- Kan worden gebruikt over wondverbanden om verplaatsing ervan te voorkomen als gevolg van wrijving ('optrekken').
- Vervang door een schoon enkellaarsje als het vuil is of volgens klinisch oordeel.
- Enkellaarsjes moeten worden weggegooid als het vuil niet verwijderd kan worden door wassen of als er tekenen zijn van defecte naden of schade aan de wrijvingsarme voering.

## Maattabel



Meet van het uiteinde van de grote teen tot de achterkant van de hiel. Als u niet zeker weet welke van de twee maten u moet gebruiken, selecteert u de grootste maat.

Model enkellaarsje	Productgrootte	Schoenmaat	Van teen tot hiel (Max)	Productcode
 <b>PFFB-002</b> Enkellaarsje instapmodel (verpakt per stuk)	XS	34-36	24cm	PFFB-002XS
	S	36.5-39	26cm	PFFB-002S
	M	39.5-41.5	28cm	PFFB-002M
	L	42-45.5	30cm	PFFB-002L
	XL	46-48	32cm	PFFB-002XL
 <b>PFFB-001</b> Enkellaarsje met Velcro® sluiting (verpakt per stuk)	XS	34-36	24cm	PFFB-001XS
	S	36.5-39	26cm	PFFB-001S
	M	39.5-41.5	28cm	PFFB-001M
	L	42-45.5	30cm	PFFB-001L
	XL	46-48	32cm	PFFB-001XL

## Wanneer te gebruiken

Parafricta® enkellaarsjes bieden verlichting tegen **wrijving** en de bijbehorende **schuifkrachten**.

Overweeg het gebruik voor patiënten onder de volgende omstandigheden (voorbeelden)

- Wanneer er vroege tekenen van huid aantasting zijn, bijv. niet-wegdrukbaar roodheid; schaafwonden; hoge sub-epidermaal vocht
- Wanneer patiënten moeilijk te verplaatsen zijn zonder de hielen op het ondersteuningsoppervlak te slepen
- Wanneer patiënten vaak hun hielen gebruiken om zich hoger in bed te duwen
- Wanneer de aandoeningen van patiënten resulteren in chronische repetitieve bewegingen of rusteloosheid
- Wanneer het verband over een bestaande decubitus vaak verschuift
- Wanneer er een specifieke oorzaak is van een zeer hoog risico op decubitus (bijv. bij diabetici of bij het levenseinde)

---

## Voorzorgsmaatregelen

- Niet gebruiken op open wonden of wonden zonder verband.
- Zorg ervoor dat volledige drukopheffing wordt gebruikt waar dit wordt aangegeven, voornamelijk bij vermoedelijke diepe weefselbeschadiging.

---

## Wasinstructies

- Parafricta® enkellaarsjes moeten in een lichte lading worden gewassen in een warme (60 °C) synthetische cyclus in een huishoudelijke wasmachine.
- In een professionele wasserij kunnen de enkellaarsjes worden gewassen gedurende 10 minuten op 70 °C (ontsmettingscyclus).
- De Velcro® sluitingen moeten tijdens het wassen gesloten zijn.
- Zwaar vervuilde artikelen kunnen worden voorgeweekt in een daarvoor bestemde oxiderende vlekverwijderaar (geen huishoudelijk/chloorbleekmiddel).
- Drogen aan waslijn (openlucht).
- Niet strijken.
- Niet chemisch reinigen.

## Referenties



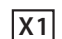


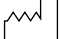








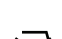

Zie [www.parafricta.com](http://www.parafricta.com) 'Publicaties' en 'Onderwijsmiddelen'

NICE Handleiding - Parafricta® enkellaarsjes en onderkledingstukken tegen doorliggen van de huid bij mensen met of met een risico op decubitus - 19 mei 2021

[www.nice.org.uk/guidance/mtg20](http://www.nice.org.uk/guidance/mtg20)

---

## Glossaire des symboles utilisés sur les notices d'emballage

 REF	Catalogusnummer	 UDI	Uniek artikelnummer
 X1	Verpakking per stuk	 LOT	Batchcode
	Raadpleeg de elektronische gebruiksaanwijzing		Productiedatum
	Website Patiëntgegevens		Uiterste gebruiksdatum
	Maximale wastemperatuur 60 °C – mild proces	 MD	Medisch hulpmiddel
	Alleen bleekmiddel met zuurstof/zonder chloor toegestaan	 CE	Voldoet aan de EU-voorschriften voor medische hulpmiddelen
	Drogen aan waslijn	 UK CA	Voldoet aan de Britse richtlijn voor medische hulpmiddelen
	Niet strijken		
	Niet chemisch reinigen		

---

## Geproduceerd door



### APA Parafricta Ltd

30 Upper High Street, Thame, OX9 3EZ, Verenigd Koninkrijk

Tel +44 1869 226566

[info@parafricta.com](mailto:info@parafricta.com)

[www.parafricta.com](http://www.parafricta.com)

APA Parafricta® Ltd is een geregistreerde fabrikant van medische hulpmiddelen bij de Britse MHRA. Het bedrijf is ook geregistreerd in de EUDAMED-database van de EU voor fabrikanten van medische hulpmiddelen.

## Vezelgehalte van enkellaarsjes

### PFFB-001 Velcro® sluiting

Body/voering: 100% nylon

Teengaas: 100% polyester

Enkelrand: 80% nylon 20% elastaan

Latexvrij



### PFFB-002 instapmodel

Body/voering: 100% nylon

Teengaas: 100% polyester

Enkelband: 97% katoen 3% elastaan

Latexvrij



---

## Geautoriseerde vertegenwoordiger in de Europese Unie



### European Healthcare & Device Solutions (Ireland) Ltd

Stratton House, Bishopstown Road, Cork T12 Y9TC, IERLAND

info@europeandevicesolutions.eu

---

## Importeur



### Hospidex nv

Grijpenlaan 23, 3300 Tienen, BELGIË

info@hospidex.eu