

Gebruikershandleiding

voor onderkledingstukken

Parafri^{ct}a[®] onderkledingstukken zijn verkrijgbaar in drie stijlen



Velcro[®] sluiting



Instapmodel



Instapmodel
boxerstijl

Parafri^{ct}a[®] onderkledingstukken van stof met lage wrijving zijn herbruikbare producten die bedoeld zijn om te helpen bij het voorkomen of genezen van decubitus, alleen of in combinatie met wondverbanden, incontinentieverband of druk herverdelende hulpmiddelen.

Decubitus (drukletsels/doorligwonden) kan leiden tot ernstige gevolgen en zelfs levensbedreigend zijn voor de gezondheid als dit niet wordt behandeld. **Vraag altijd advies aan een gekwalificeerde zorgverlener als u denkt dat u, of een persoon die u verzorgt, decubitus heeft.**

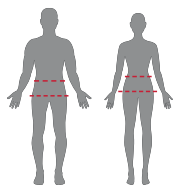
Gebruiksaanwijzing

- Ontworpen voor voortdurende slijtage onder kleding of nachtkleding om de huid op het heiligbeen, de billen en heupen te beschermen.
- Kan worden gebruikt in combinatie met andere druk herverdelende hulpmiddelen zoals matrassen, kussens.
- Selecteer de gewenste stijl in de grootte volgens de maattabel.




Gebruiksaanwijzing (fortsetzung)

- Als het voor de gebruiker moeilijk is om de instapmodellen aan of uit te trekken, kunt u het gebruik overwegen van de Velcro® sluiting die kan worden geopend aan de voorzijde.
- Vervang door schone onderkleding bij bevuiling of volgens een klinisch oordeel.
- Kan worden gebruikt over wondverbanden om verplaatsing ervan te voorkomen als gevolg van wrijving ('optrekken').
- Er kunnen incontinentieverbanden worden gedragen, maar kwetsbare huid of wonden met verband dienen idealiter in contact te blijven met de voering van het onderkledingstuk. De verbanden kunnen, indien nodig, met een broek met netfixatie onder het onderkledingstuk worden gehouden.
- De onderkledingstukken moeten worden weggegooid als het vuil niet verwijderd kan worden door wassen of als er tekenen zijn van defecte naden of schade aan de wrijvingsarme voering.

Maattabel



Gebruik de onderstaande tabel. Zowel de maten van de taille als de heupomtrek zijn nodig om de beste pasvorm te garanderen. Kies eerst de **heupomtrek** die best past bij de gebruikers als u twijfelt welke maat u moet selecteren.

Productbeschrijving	Productgrootte	Heupomtrek (cm)	Tailleomtrek (cm)	Productcode
 <p>PFFUG-001 Velcro® sluiting</p>	X-klein	86-90	56-65	PFFUG-001XS
	Klein	91-99	66-80	PFFUG-001S
	Medium	100-110	81-93	PFFUG-001M
	Groot	111-120	94-106	PFFUG-001L
	X-groot	121-130	107-121	PFFUG-001XL
 <p>PFFUG-002 instapmodel</p>	X-klein	86-90	56-65	PFFUG-002XS
	Klein	91-99	66-80	PFFUG-002S
	Medium	100-110	81-93	PFFUG-002M
	Groot	111-120	94-106	PFFUG-002L
	X-groot	121-130	107-121	PFFB-001XL
 <p>PFFUG-003 instapmodel boxerstijl</p>	X-klein	86-90	56-65	PFFUG-003XS
	Klein	91-99	66-80	PFFUG-003S
	Medium	100-110	81-93	PFFUG-003M
	Groot	111-120	94-106	PFFUG-003L
	X-groot	121-130	107-121	PFFUG-003XL
	XX-groot	131-152	122-140	PFFUG-003XXL

Wanneer te gebruiken

Parafricta® onderkledingstukken bieden verlichting tegen **wrijving** en de bijbehorende **schuifkrachten**.

Overweeg het gebruik voor patiënten onder de volgende omstandigheden (voorbeelden):

- Wanneer er vroege tekenen van huid aantasting zijn, bijv. niet-wegdrukbaar roodheid; schaafwonden; hoog sub-epidermaal vocht.
 - Wanneer patiënten de huid op het steunoppervlak slepen terwijl ze zich herpositioneren, bijvoorbeeld met een transferbord van bed naar stoel.
 - Rolstoelgebruikers.
 - Wanneer de aandoeningen van patiënten resulteren in chronische repetitieve bewegingen of rusteloosheid.
 - Wanneer het verband over een bestaande decubitus vaak verschuift.
 - Wanneer er een bijzondere oorzaak is van een zeer hoog risico op decubitus (bijv. bij diabetici of bij het levenseinde).
-

Voorzorgsmaatregelen

- Niet gebruiken op open wonden of wonden zonder verband.
 - Zorg ervoor dat volledige drukopheffing (ook) wordt gebruikt waar dit wordt aangegeven, met name bij vermoedelijke diepe weefselbeschadiging.
-

Wasinstructies

- Parafricta® onderkledingstukken moeten worden gewassen in een warme (60°C) synthetische cyclus in een huishoudelijke wasmachine.
- In een professionele wasserij mag de onderkleding gedurende 10 minuten worden gewassen op 70°C (ontsmettingscyclus).
- Zwaar vervuilde artikelen kunnen worden voorgeweekt in een daarvoor bestemde oxiderende vlekverwijderaar (geen huishoudelijk/chloorbleekmiddel).
- Drogen aan waslijn (openlucht).
- Niet strijken.
- Niet chemisch reinigen.






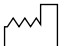










Referenties

Zie www.parafricta.com 'Publicaties' en 'Onderwijsmiddelen'

NICE Handleiding - Parafricta® enkellaarsjes en onderkledingstukken tegen doorliggen van de huid bij mensen met of met een risico op decubitus - 19 mei 2021

www.nice.org.uk/guidance/mtg20

Verklarende woordenlijst met symbolen die worden gebruikt op verpakkingsbijlagen

 REF	Catalogusnummer	 UDI	Uniek artikelnummer
 X1	Verpakking per stuk	 LOT	Batchcode
	Raadpleeg de elektronische gebruiksaanwijzing		Productiedatum
	Website Patiëntgegevens		Uiterste gebruiksdatum
	Maximale wastemperatuur 60 °C – mild proces	 MD	Medisch hulpmiddel
	Aleen bleekmiddel met zuurstof/zonder chloor toegestaan	 CE	Voldoet aan de EU-voorschriften voor medische hulpmiddelen
	Drogen aan waslijn	 UKCA	Voldoet aan de Britse richtlijn voor medische hulpmiddelen
	Niet strijken		
	Niet chemisch reinigen		

Geproduceerd door



APA Parafricta Ltd

30 Upper High Street, Thame, OX9 3EZ, Verenigd Koninkrijk

Tel +44 1869 226566

info@parafricta.com

www.parafricta.com

APA Parafricta® Ltd is een geregistreerde fabrikant van medische hulpmiddelen bij de Britse MHRA. Het bedrijf is ook geregistreerd in de EUDAMED-database van de EU voor fabrikanten van medische hulpmiddelen.

Vezelgehalte van onderkledingstukken

PFFUG-001 Velcro® sluiting korte stijl

Body/voering: 100% nylon

Samenstelling: 80% nylon, 20% elastaan

Inzetrand: 100% katoen

Elastiek: 83% nylon, 17% elastaan

Latexvrij



PFFUG-002 instapmodel

Body/voering: 100% nylon

Samenstelling: 80% nylon, 20% elastaan

Inzetrand: 100% katoen

Elastiek: 83% nylon, 17% elastaan

Latexvrij



PFFUG-003 instapmodel boxerstijl

Body/voering: 100% nylon

Elastiek: 83% nylon, 17% elastaan

Latexvrij



Geautoriseerde vertegenwoordiger in de Europese Unie



European Healthcare & Device Solutions (Ireland) Ltd

Stratton House, Bishopstown Road, Cork T12 Y9TC, IERLAND

info@europeandevicesolutions.eu

Importeur



Hospidex nv

Grijpenlaan 23, 3300 Tienen, BELGIË

info@hospidex.eu